

# ZOLL AED 3® Trainer

## DAE per la Formazione e Accessori



### Simulazione completa di ZOLL AED 3 dotato di Real CPR Help, un feedback in tempo reale sulla RCP

Il dispositivo ZOLL AED 3® Trainer è l'unico DAE trainer che offre Real CPR Help®, un feedback in tempo reale sulla qualità delle compressioni effettuate dal discente. Il trainer consente agli studenti di apprendere la corretta frequenza e profondità delle compressioni toraciche durante la RCP durante la formazione.

Il dispositivo ZOLL AED 3 Trainer è progettato per simulare in toto il funzionamento del DAE clinico, offrendo così agli studenti un'esperienza di soccorso più realistica. Il dispositivo ZOLL AED 3 Trainer include:

- Un display LCD con immagini a colori del soccorso che rispecchiano ciò che vede uno studente sul dispositivo ZOLL AED 3 clinico
- Sensori di contatto sulle piastre di formazione che rilevano il contatto delle piastre con il manichino, eliminando la necessità di un controllo a distanza per le simulazioni di soccorso
- Un pulsante di pausa sul dispositivo che consente all'istruttore di mettere in pausa uno scenario formativo
- Materiali di consumo duraturi che consentono risparmio di tempo e denaro
- Aggiornamento del software/configurazione della lingua semplici mediante USB

### Conforme alle linee guida ERC/AHA 2015

Configurazione semplice: tutta la gestione dello scenario formativo e dei settaggi viene eseguita sul trainer.

Le opzioni configurabili includono:

- Scenario formativo
- Modalità operativa (semi-automatica o completamente automatica)
- Messaggi per soccorritori non professionisti
- Messaggi di controllo del respiro
- Volume dei messaggi vocali
- Lingua (varia in base al codice ordinato)


### Il dispositivo ZOLL AED 3 Trainer include tutto ciò di cui ha bisogno l'istruttore:

- Dispositivo Trainer ZOLL AED 3
- Cavo elettrodi training CPR Uni-padz® per dispositivo ZOLL AED 3 Trainer (almeno 100 sessioni formative)
- Gel/rivestimento per elettrodi da training CPR Uni-padz per dispositivo ZOLL AED 3 Trainer (almeno 50 sessioni formative)
- Quattro (4) batterie formato torcia
- Guida per l'operatore


**ZOLL®**



Feedback della RCP in tempo reale con ampio indicatore della profondità di compressione a due colori

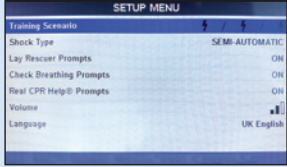

È possibile configurare il funzionamento del dispositivo e gli scenari di soccorso direttamente sul dispositivo

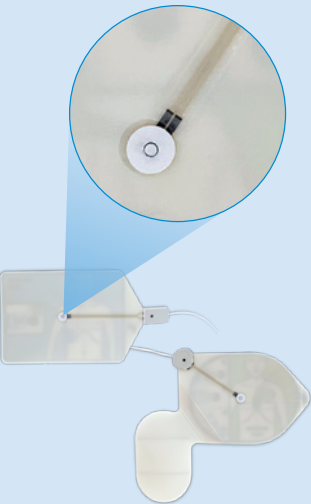

I sensori delle piastre rilevano il contatto con il manichino, eliminando la necessità di un controllo a distanza

## Specifiche tecniche del dispositivo ZOLL AED 3 Trainer

**Dimensioni:** (P x L x A) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm

**Peso:** 1,8 kg batteria inclusa

**Alimentazione:** quattro (4) batterie formato torcia (incluse) per DAE da formazione (utilizzabili per oltre 16 ore di formazione)

## Scenari di soccorso

Gli istruttori possono impostare diversi scenari di soccorso direttamente sul trainer utilizzando gli appositi pulsanti funzione.



## Accessori per il dispositivo ZOLL AED 3 Trainer

Le parti di ricambio devono essere ordinate separatamente.



Gel adesivi sostitutivi per elettrodi Trainer CPR Uni-padz®  
Codice 8028-000012 (Conf. 5 pz.)



Rivestimenti sostitutivi per elettrodi Trainer CPR Uni-padz  
Codice 8028-000013



Manichino dimostrativo Trainer  
Codice 8000-0835-01



Kit di aggiornamento software USB Trainer  
Codice 8028-000011-XX



Cavo elettrodi training CPR Uni-padz  
Codice 8028-000010

**ZOLL Medical Corporation**  
**Worldwide Headquarters**  
269 Mill Road  
Chelmsford, MA 01824  
978-421-9655  
800-804-4356

Per gli indirizzi e i numeri di fax dei consociati e delle sedi globali, visitare [www.zoll.com/contacts](http://www.zoll.com/contacts).

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

©2019 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL e ZOLL AED 3 sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari. Il defibrillatore ZOLL AED 3 non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti.

Stampato negli Stati Uniti MCN PP 1902 0365-11

**ZOLL**